



# LIFECHIP INSTRUCCIONES DE APLICACION



Destron Fearing™

## PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

Lea detenidamente las instrucciones en su totalidad antes implante del microchip y siga las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones y precauciones puede dar como resultado una entrega y un rendimiento inadecuados.

Este producto está diseñado para ser implantado por o bajo la supervisión de un veterinario autorizado o de acuerdo con las leyes estatales.

No utilice este producto si el paquete protector que contiene la jeringa precargada está rota o perforado, ya que la esterilidad podría verse comprometida.


### 1. Sitio de implantación del microchip:

Lado izquierdo del cuello a medio camino entre nuca y cruz, en ligamento nucal, y aproximadamente de 1,0 a 2,0 pulgadas debajo de la línea de la melena, dependiendo de la edad y condición corporal.



2. Escanee el sitio de implantación y alrededores con el Global Pocket Reader Plus (GPR+), u otro lector universal para asegurar que el caballo no ha sido previamente implantado.

3. Escanee el microchip en el paquete para garantizar una lectura correcta y verificar ese número escaneado coincide con el uno impreso en las etiquetas de código de barras.

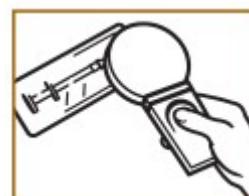

4. Limpie y prepare asépticamente el sitio para implantación.

5. Retire el bloqueo de seguridad en la base de el émbolo (cerradura blanca) y luego quite el capuchón de la aguja.

Insertar la aguja hasta su base como una inyección intramuscular y presione el émbolo.

6. Aplique una ligera presión en el sitio de la implantación al retirar el dispositivo para minimizar cualquier sangrado.



7. Deseche correctamente la aguja y la jeringa.

8. Vuelva a escanear el microchip para asegurarse de que implantación.

9. Pegue la etiqueta del código de barras en los registros del caballo y conserve el código para referencia futura.

10. Registre el número de microchip con asociación de raza apropiada y su base de datos preferida. Nosotros recomendamos registrarse en [RegistroAnimal.org](http://RegistroAnimal.org) seleccione "equino" como especie (**sin cargo**)

Con el registro, recibirás inscripción de por vida en la base de datos, con actualizaciones gratuitas e ilimitadas para su Información y contacto.



11. El caballo puede experimentar molestias locales leves, incomodidad similar a una rutina inyección intramuscular y puede mostrar signos de rigidez leve o dolor para unos días después de la implantación del chip.

Es mejor implantar el microchip a un caballo cuando tiene un día o dos libres de actividad extenuante.

Por favor planifique en consecuencia